

ハコデガード ライト

..... hacodé guard light


「ハコデガード ライト」は、防護用「使い捨て」フェイスガード。側面を押し込むだけで、誰でも簡単に組み上がります。

使用例



商品サイズ

畳んだ状態

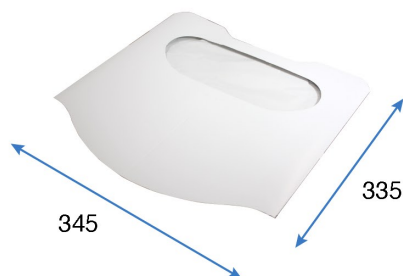

(単位: mm)

組み立てたとき



用途

● 飛沫感染を抑制する、防護用「使い捨て」フェイスガード。

メリット

新型コロナウイルス感染症は、一般的に飛沫や接触で感染し、これは治療にあたる医療機関においても同様です。「ハコデガードライト」は、総合パッケージメーカー・サガシキの箱製造の技術を活用し、医療機関からの助言を元に開発されました。ワンタッチでの組み立て、内部の熱拡散を高めた開放構造、使用後に「使い捨て」できる紙素材、さらに「スポンジスワブ」の挿入口を設けて利用範囲を広げた、画期的なフェイスガードです。



① 組み立てはワンタッチ。畳まれている「両側面部を掴んで押し込む」だけ。成型に時間もコツもいりません。



③ 正面にあるふたつの穴は「スポンジスワブ」の挿入口。装着者の「くしゃみ・咳」による飛沫を抑制します。



② 頭頂部両側と後頭部に設けた開口部は、内部（頭部）の熱拡散を促す「ベンチレーション（通気）」機構。



④ 廃棄方法は「畳んで捨てる」だけ。使用後に「消毒」する必要がなく、都度「使い捨て」できます。

使用方法



① 成型する

両方の側面部を掴んで、そのまま押し込みます。



③ 固定する

装着者の頭頂部が「ハコデガードライト」の天面に触れるまで深く被ります。



② 装着する

成型した「ハコデガードライト」を頭から被ります。



④ 廃棄する

使用後は頭部から外し、畳んで捨てます。